

HORICO® – KRONENTRENNER C4XLCM 314 014



ANMERKUNGEN

- bester Kronentrenner seit Langem
- sehr guter Testeindruck, wir waren sehr zufrieden

LANGLEBIG UND SCHARF

Wenn es um das Thema „Kronen auftrennen“ geht, soll es schnell gehen und wenig Material kosten. Heutzutage gibt es verschiedene Kronentrenner, die auf die unterschiedlichen Werkstoffe der Kronen abgestimmt sind – DEN EINEN für alle Materialien gibt es nicht.

Die Qualitätsfirma HORICO® stellt den Kronentrenner C4XLCM 314 014 für das effiziente Auftrennen von Kronen aus Metall und weicher Verblendkeramik vor:

TWO-IN-ONE: FÜR METALLKRONEN UND KRONEN MIT KERAMIKVERBLENDUNG

Der Kronentrenner C4XLCM 314 014 hat eine hocheffektive Schneidengeometrie und ist auf die werkstofflichen Eigenschaften von beiden Materialien abgestimmt: Er wirkt auf Keramikverblendungen und Metall gleichermaßen aggressiv.

Hohe Standzeit ...


Es handelt sich um eine Zweikomponentenkonstruktion, die Dank ihres Stahlschaftes hervorragende Schwingungseigenschaften hat – kombiniert mit der Haltbarkeit des hochwertigen Hartmetallkopfes. Reine Hartmetallkonstruktionen besitzen diese „Dämpfung“ nicht.

... und sehr robust dank größerem Durchmesser

Durch den etwas größeren Durchmesser von 014 besitzt der C4XLCM 314 014 mehr Schneiden und ein größeres Spanvolumen. Die einzelne Schneide wird nicht so stark belastet. Die Folge ist eine deutliche Leistungssteigerung bei der Anzahl der getrennten Kronen.


WIE VIELE KRONEN HABEN SIE IM DURCHSCHNITT MIT DEN KRONENTRENNERN AUFGETRENNT?

- 54 % vier und mehr
- 38 % drei
- 4 % zwei
- 4 % eins

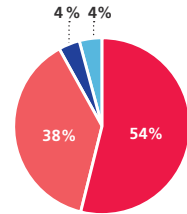


WIE EMPFANDEN SIE DIE SCHNELLIGKEIT DER KRONENTRENNER?

- 81 % schnell schneidend
- 19 % mittel
- 0 % langsam schneidend

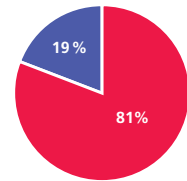


WIE FINDEN SIE DIE HORICO®-KRONENTRENNER IM VERGLEICH ZU IHREM BISHERIGEN INSTRUMENT?

- 77 % besser
- 8 % gleich
- 8 % keine Angabe
- 7 % schlechter

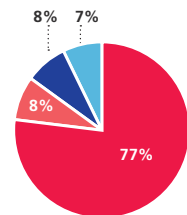


WÜRDEN SIE DIE HORICO®-KRONENTRENNER IN IHRER PRAXIS EINSETZEN?

- 88 % ja
- 12 % nein

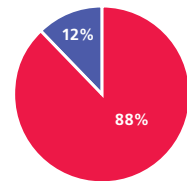

WÜRDEN SIE IHREN KOLLEGEN DIE HORICO®-KRONENTRENNER WEITEREMPFEHLEN?

- 85 % ja
- 15 % nein

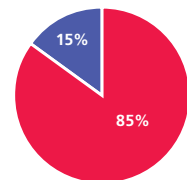

LIEBE LESER DES DENTAL BAROMETER,

Unser Familienunternehmen Hopf, Ringleb & Co. GmbH & Cie. stellt seit 98 Jahren rotierende Instrumente der Marke HORICO® für Zahnärzte und Zahntechniker her. Um das Kronentrennen für Zahnärzte leichter zu machen, haben wir zusammen mit einem Biophysiker diesen speziellen Hartmetall-Kronentrenner entwickelt. Mehr als die Hälfte der Testzahnärzte konnte vier oder sogar noch mehr Kronen trennen und dadurch Zeit und Geld sparen. Die Mehrzahl der Zahnärzte fand den Kronentrenner besser als das bisher verwendete Produkt, würde ihn in ihrer Praxis einsetzen und an Kollegen weiterempfehlen!

Wir freuen uns sehr über diese positiven Ergebnisse. Wichtig ist noch zu wissen: Hartmetall-Kronentrenner eignen sich hervorragend für Metallkronen und Kronen aus Metall-Verblendkeramik. Für vollkeramische Kronen aus harter Keramik (z.B. Zirkon, Glaskeramik, Lithium-Disilikat) sind sie jedoch nicht gut geeignet, bitte dafür die HORICO®-Diamant-Kronentrenner verwenden (z.B. Löwen-Diamantschleifer AuFG 109X014). Vielen Dank!

Dr. Susanne Hopf, Geschäftsführerin HORICO®

